



**Thermal Therapy Physio Vag**  
offre un trattamento indolore  
e non invasivo con risultati  
sorprendenti fin dalla prima seduta.

I trattamenti **Thermal Therapy Physio Vag** contribuiscono al miglioramento della soddisfazione sessuale, inibita a causa dei cambiamenti delle membrane mucose della vagina e della vulva, e a mantenere una vita intima appagante.


#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- 3 manipoli diversi per trattamenti interni ed esterni
- frequenze variabili per ottimizzare il trattamento secondo la profondità da raggiungere e la patologia da trattare
- Modalità continua e pulsata
- Controllo della temperatura
- Touch screen a colori, encoder, interruttore a pedale



Santec srl – Via L. Da Vinci, 4/11 - Livorno - Tel. 0586 444539  
WWW.SANTECLASER.IT

PRODOTTO DA:  
**GP**  
General Project  
ADVANCED SCIENTIFIC TECHNOLOGIES

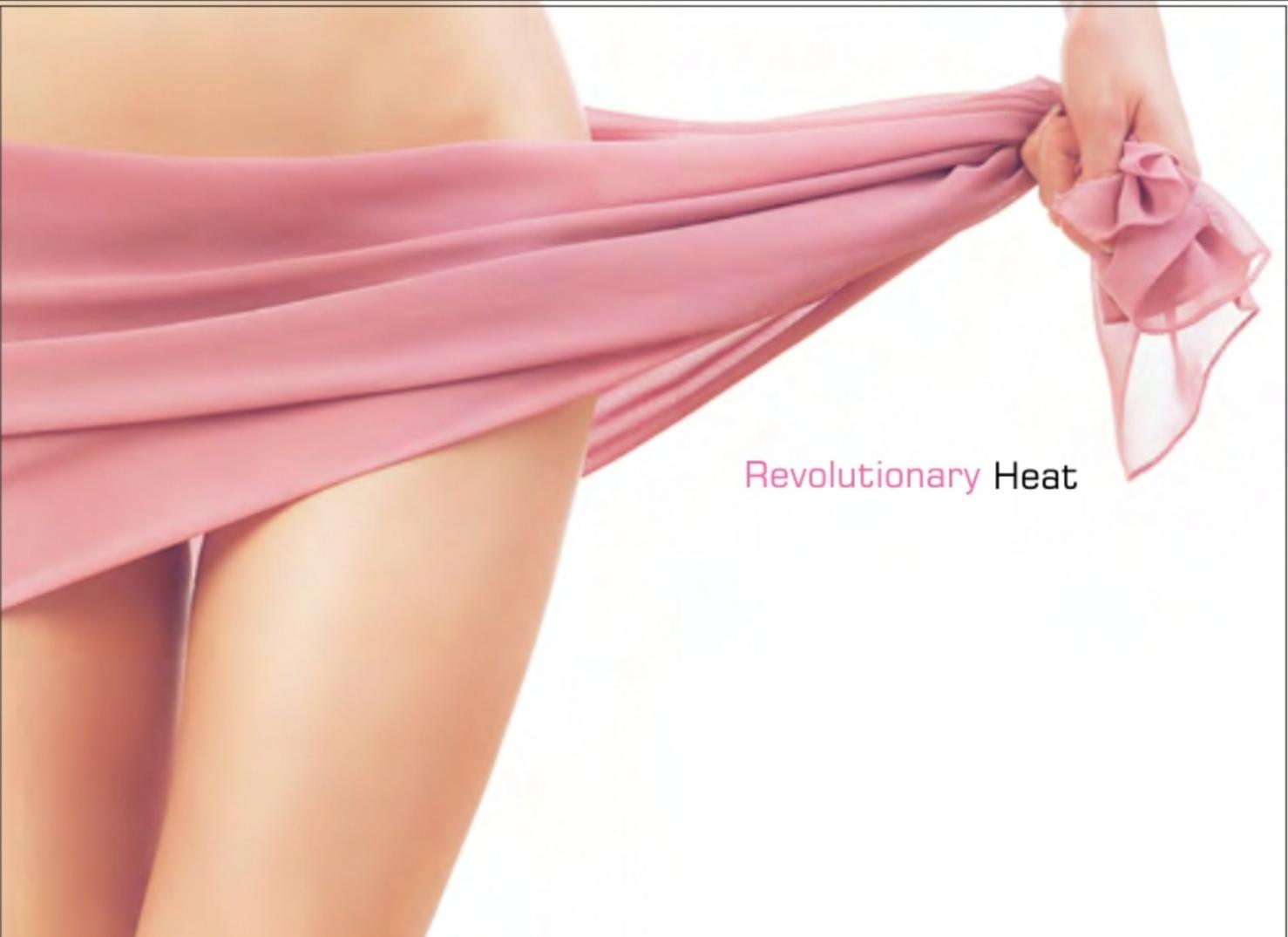

Revolutionary Heat

PhysioVag



# PhysioVag

## Trattamenti vaginali a radiofrequenza personalizzabili per un ampio numero di applicazioni ginecologic

Tre manipoli diversi permettono tutte le applicazioni non invasive e non chirurgiche che sfruttano il principio della diatermia, cioè il riscaldamento profondo dei tessuti provocato da onde elettromagnetiche ad alta frequenza.

I trattamenti eseguiti con **Thermal Therapy Physio Vag** agiscono contro patologie funzionali come la secchezza ed il prolasso vaginale, l'incontinenza, e, combattendo l'invecchiamento dei tessuti, ottengono risultati estetici apprezzabili, come **il rimodellamento delle piccole e grandi labbra e il tightening vaginale**.

La diatermia ha un impatto rilevante sui trattamenti ginecologici, intervenendo sulla lassità vaginale, causata per esempio dai parti o dall'invecchiamento naturale, per ridurla e riportare la mucosa alle sue dimensioni originali.

La radiofrequenza stimola il collagene e ne aumenta la turgidità, ristabilisce un adeguato approvvigionamento ematico e garantisce una migliore idratazione e traspirazione vaginale, riducendo così i sintomi dell'invecchiamento e della secchezza, permettendo un reale ringiovanimento funzionale.

Il risultato è una vagina più giovane, tonica, elastica e lubrificata.



**Thermal Therapy Physio Vag** è dotata di tre manipoli diversi, che lavorano sia in modalità monopolare che bipolare, per trattamenti interni ed **esterni**.

La modalità è selezionabile direttamente dal touchscreen. Ogni manipolo può lavorare a 4 frequenze differenti che permettono di variare la profondità di azione a seconda del trattamento da eseguire.

Inoltre, la temperatura raggiunta durante il trattamento è **costantemente sotto controllo** grazie ad appositi sensori, posizionati all'interno di ciascun manipolo.

Il valore viene visualizzato sullo schermo dell'apparecchiatura che, grazie ad un allarme, interrompe il trattamento in caso di calore eccessivo.

### APPLICAZIONI

- Tightening vaginale
- Ringiovanimento vaginale
- Secchezza vaginale
- Incontinenza
- Prolassi vaginali



  
**SANTEC**  
WWW.SANTECLASER.IT